



# YOHO 优活椅<sup>2</sup>

漂浮式推拿按摩椅

OG-5308 使用手册 / Use Manual



## 目录

安全说明	2
保修权限	5
产品结构	6
安装说明	8
产品移动说明	9
控制器说明	10
操作说明	11
功能特点	16
产品规格	17
异常情况	18
产品保养	19
联络我们	20




OGAWA

奥佳华

融入生活 享受健康

[www.ogawaworld.net.cn](http://www.ogawaworld.net.cn)

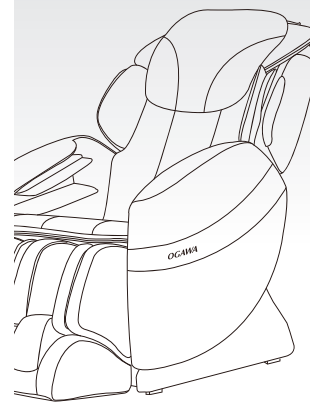

## 安全说明

# 警告!


此按摩椅必须使用和插头相匹配的插座。不正确的接地将会导致触电危险的发生。

请不要擅自改装插头或插座，务必委托专业的技术人员进行检查。


在使用电器产品时，为减少触电、灼伤、火灾、或人员伤害的危险，应遵守基本安全预防措施，包括以下内容：

在使用前请阅读所有的使用说明。

1. 务必使用和插头相配的插座。
2. 一定要确保插头完全插入插座内，以减少短路或火灾危险。
3. 在使用后或清洁前，请务必及时拔掉插头。
4. 请勿在高湿度的环境下使用本产品。
5. 请勿在室外或阳光直射的地方存放或使用本产品。
6. 如果在使用的过程中突然停电，请立即将开头拨至“O”的位置，且拔掉插头，以免来电时损坏本产品。
7. 当电源线潮湿或损坏时请勿使用按摩椅。
8. 请勿用湿手插入和拔掉插座，以免发生意外。
9. 当小孩、伤残人士、行动不便者在按摩椅附近或使用按摩椅时，一定要有人在场看护。
10. 只能将本产品用于本说明书中阐述的用途。

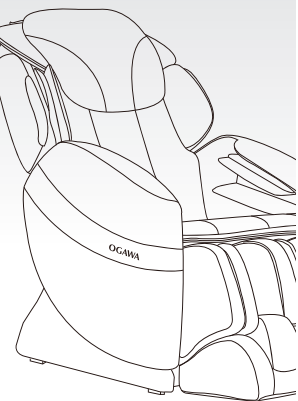


11. 不要使用非 OGAWA 推荐的附件。
12. 在使用过程中请勿坐在按摩椅小腿上，以免导致意外。
13. 请勿试图站在扶手或靠背上，以免按摩椅发生倾倒从而导致意外。
14. 按摩过程中请勿进入睡眠状态。
15. 请经常保持按摩椅清洁，避免将其他物体插入按摩椅的缝隙中。
16. 请勿直接通过拉扯电源线来移动按摩椅。
17. 请确保当降低小腿或靠背时，其下方无其他物体，特别是小孩。
18. 请在每次使用前，检查按摩椅靠背绒布等处是否有异常裂缝。如有异常，请勿使用并即时联系 OGAWA 售后服务中心。
19. 本产品仅为居家使用而设计。
20. 当您无法确定自己是否能使用按摩椅时，请先咨询医师。
21. 为避免因使用此按摩椅而导致不适或伤害，以下人士在使用本产品前应咨询医师：
  - 患有严重恶性肿瘤者
  - 患有严重心脏病者
  - 孕妇、产妇或月经期者
  - 刚做完手术，且伤口还没愈合者
  - 体内植入医用电子器械者
  - 因意外而造成脊髓疾病、脊椎骨折、肌肉拉伤或断裂者
  - 局部皮肤破损、溃疡、出血患者不适宜按摩。
22. 如在使用过程中觉得疼痛，请立即停止使用；如果在使用过程中受到损伤，请立即就医。
23. 请勿按摩红肿或发炎的皮肤。
24. 本产品仅为家庭提供舒适的按摩享受，并非专业的按摩医疗机械，

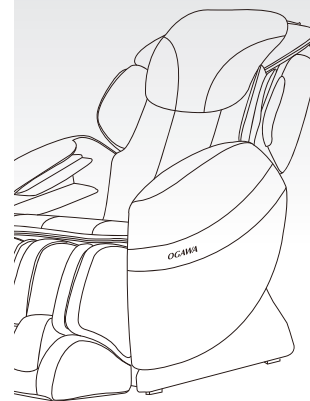


因此不能代替专业的治疗。

25. 建议每天使用按摩椅的时间为 30 分钟，按摩同一部位时间不宜超过 15 分钟，否则过度按摩会导致适得其反的效果，而且长时间使用会导致按摩椅过热并缩短产品使用寿命。
26. 请勿在喷气体溶胶或输氧的环境中使用本产品。
27. 12 岁或以下儿童不适宜用本产品。
28. 如果电源线损坏，必须使用 OGAWA 或合法代理商所提供的专用电源线。
29. 本产品具有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意！

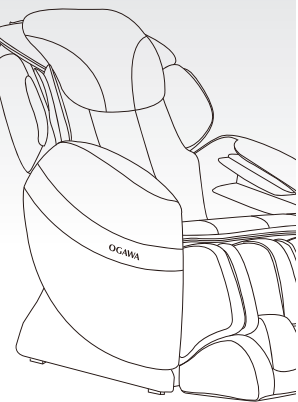


## 保修权限

1. 本保修权限不可转让。
2. 本保修服务仅对在 OGAWA 购买的产品有效。
3. 当要求保修服务时请出示正本购买凭据。
4. 在保修范围内的维修服务自购买之日起一年内有效。
5. 由于错误使用、不合理保养以及未经授权私自改装和维修此产品而导致的损坏，不属于保修范围。
6. 此保修范围不包括不属于产品本身的附件。
7. 此保修范围不适用于租赁、交易、商业、机构或其他非居民使用者。
8. 此保修范围所涉及的维修服务必须经过 OGAWA 授权，且必须由授权的技术人员维修。
9. 若需更换的维修附件缺货，OGAWA 有权采用替代配件进行维修。

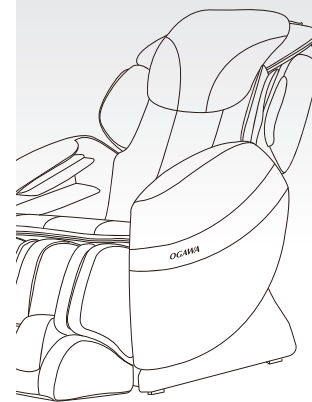


## 产品结构


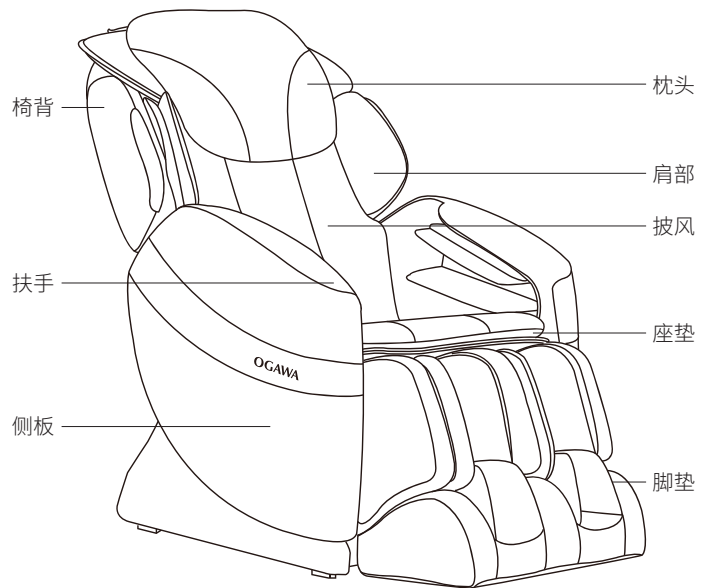


6

## 气囊按摩位置

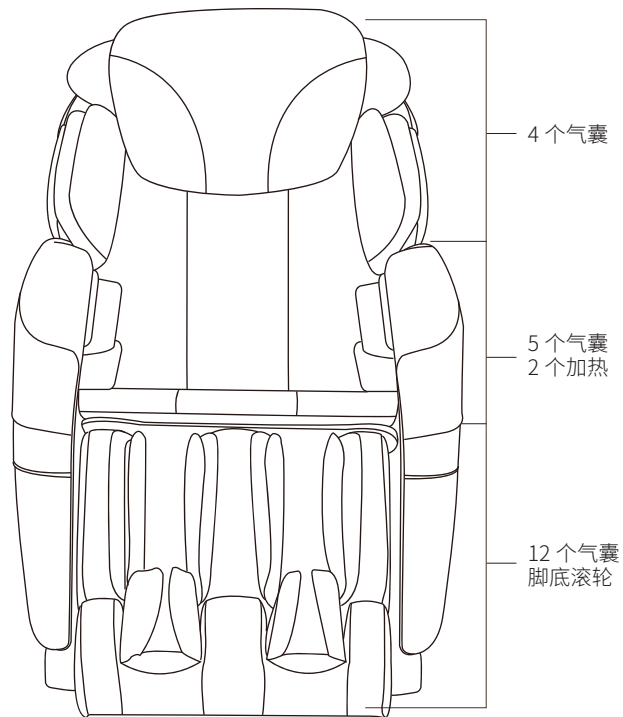


7

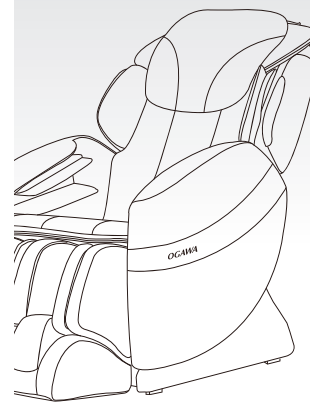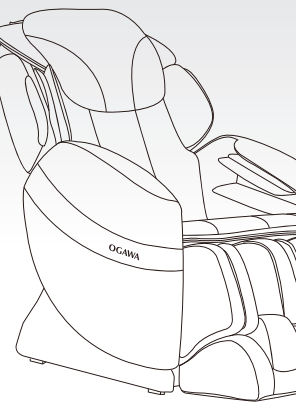


## 安装说明

步骤一、接通电源，将按摩椅座架下方的电源开关按至“1”的位置，按摩椅自动调节到复位状态。

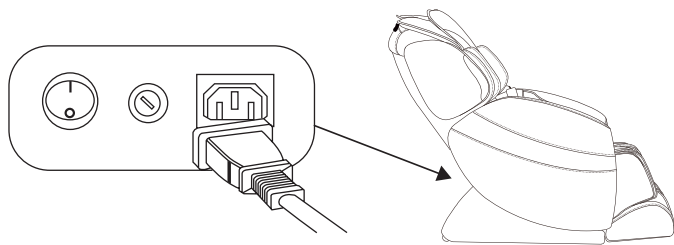

步骤二、枕头连接。

A. 将披风与椅背上对应的拉链拉好。


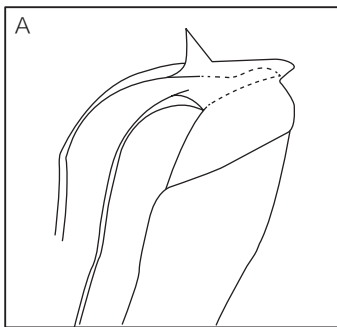


## 产品移动说明


拖起小腿垫，将椅背倾斜约 45 度以方便在室内自由移动按摩椅。

注意：

- i. 在移动按摩椅时一定要把腿垫完全收回，若不遵守，在移动过程中腿垫收到原始位置时，有可能导致受伤的情况。
- ii. 当有人坐在按摩椅上时，请不要移动椅子。
- iii. 移动按摩椅时可能会损伤地板，建议在本产品下铺上垫子等。

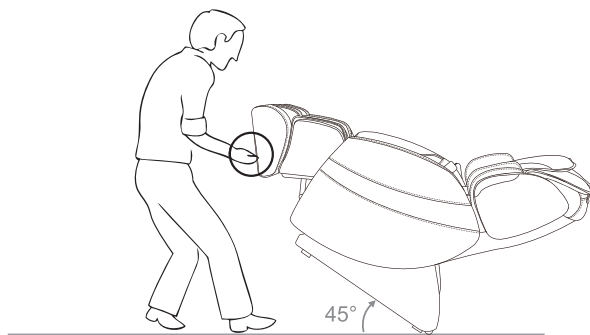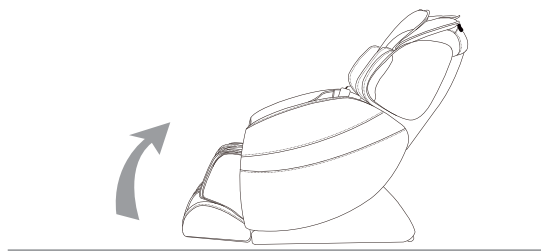

## 控制器

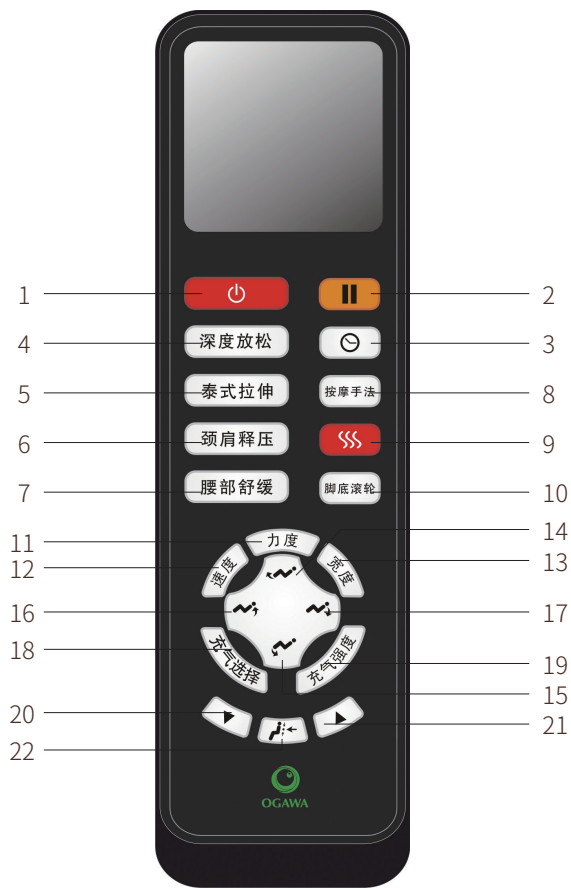

## 操作说明

接通电源，将按摩椅座架下方的电源开关按至“1”的位置，按摩椅处于复位状态，椅背升到最高，腿垫降到最低。此时按摩椅进入待机状态，待机状态只有仰躺、起身、抬脚、降脚和开关 5 个功能可以操作。

### 按摩椅控制键

#### 1) 开 / 关

##### 整机按摩功能启停控制键

产品处于复位模式时单击此键开机，手控器屏幕显示，此时按下任何按摩功能键开始接受按摩并启动定时功能。

产品处于运行状态时单击此键关机，按摩轮、靠背和小腿回复到原有位置，同步开关键闪烁。

#### 2) 暂停

##### 暂停控制键

如需暂停按摩功能，请按暂停键。此时所有按摩功能都将暂停，包括定时功能，再单击此键则继续开启暂停之前的按摩功能及定时功能。

#### 3) 定时

##### 按摩时间控制键

当按摩程序启动时，定时功能自动设定为 15 分钟，每按一次定时功能，定时的时间将按” 20>25>30>5>10>15” 回来循环设定。

### 自动按摩功能

当 4 个自动按摩程序中任意一个启动之后，将对肩部的高度进行自动检测以达到最佳的按摩行程，同时也可根据需要者对按摩位置进行手动调整。

### 自动按摩程序：

- 4) 深度放松
- 5) 泰式拉伸
- 6) 颈肩释压
- 7) 腰部舒缓

### 8) 按摩手法（手动按摩功能控制键）

#### 揉捏、捶打、瑞典式、指压、揉敲、推拿手法选择键


按一次此控制键启动全背部揉捏按摩功能，每按一次此控制键将按顺序切换“捶打>瑞典式>敲击>指压>拍打>推拿>停止”循环的按摩手法。

### 9) 加热

按一次此功能控制键以开启腰部加热功能，再按一次解除加热。

### 10) 脚底滚轮

按一次此键，开启脚底滚轮按摩功能。再按一次，则停止此功能。

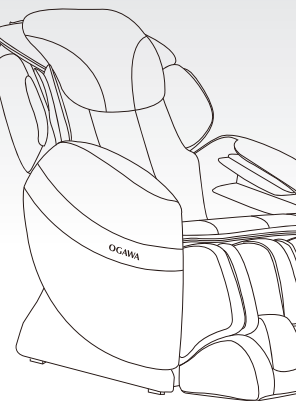

### 11) 力度

#### 按摩轮按摩功能力度调节键 --5 档可调

在启动按摩轮按摩功能后，每按一次此键，按摩力度将按由弱到强的顺序调整。

### 12) 速度

#### 按摩轮按摩功能速度调节键 --5 档可调

在启动按摩轮按摩功能后，每按一次此键，按摩速度将按由慢到快的顺序循环调整。

### 13) 宽度调节

#### 捶打式、推拿式及指压式按摩功能宽度调节 --3 种宽度

在启动捶打式、推拿式及指压式，按摩后按此按键可对按摩头进行宽度调整，共三档（窄、中、宽循环）。

### 14/15) 腿部抬脚 / 降脚


#### 腿部抬脚 / 降脚与角度调节控制键

控制腿部抬脚或降脚时，按一次腿部抬脚或降脚键，腿部将抬脚或降脚。调节腿部角度时，按一次腿部抬脚或降脚键，当调节到适当位置时，再按一次这两个按键任一个键即可定位。

### 16/17) 靠背仰躺 / 起身

#### 按摩椅背角度调节控制键

通过这两个控制键可以调节按摩椅靠背角度，按一次仰躺或起身，按摩

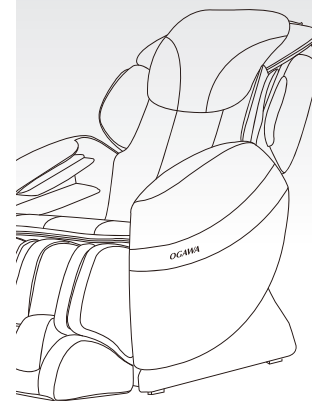



椅靠背角度将进行调节，当调节至适当位置时，再按一次仰躺或起身中的其中任一控制键即可定位。

### 18) 充气选择 (腿脚气压、手气压、肩部气压、全身气压)

开机后，单击此区域键，开启脚腿气压按摩，每按一次此控制键将按顺序切换“手部气压 > 肩部气压 > 全身气压 > 停止”循环的按摩手法。

### 19) 充气强度

#### 充气按摩模式下强度调节 -5 种大小可调节

自动或手动充气按摩模式下，每按一次此键将对充气按摩力度进行由弱到强循环调节。

### 20/21) 背部按摩高度上下微调键

#### 腿部震动功能启停控制键


当手动或自动扫描到的行程无法满足个人要求时，可以在按摩椅发出提示音 10 秒内，持续按住上 / 下键，按摩滚轮将根据您的需求上行或下行，至适宜的位置释放此键，即可锁定上限的按摩行程，以达到微调的目的。

**注意：在定点或区间按摩时，也可通过这两个按键来调节按摩位置。**

### 22) 定点 / 区间

#### 背部定点功能控制键

此键用于启停靠背部定点按摩功能。在所需按摩的位置单击此键将对按摩位置提供集中的定点按摩。再单击切换到区间功能。

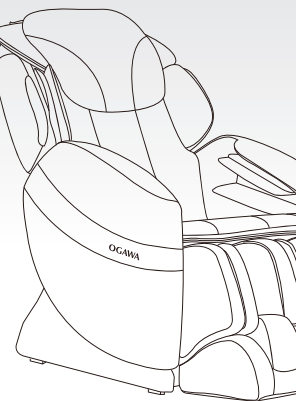


### 区间功能控制键

此键用于启停靠背部区间按摩功能。则在原点上下 8CM 的区间内提供背部区间按摩，再单击此键则解除背部“定点 / 区间”按摩功能。

### 操作完成

使用完毕之后，按下“开 / 关”键，此时按摩椅将停止操作，按摩滚轮将自动复位，与此同时开关键闪烁，按摩滚轮复位。此时，请按下按摩椅靠背下方的电源开关至“0”的位置，接着拔出电源线。

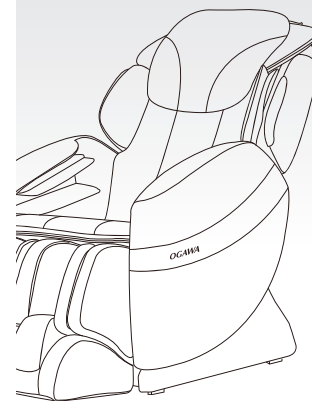


## 功能特点

OGAWA 按摩椅通过电脑智能化控制，配合揉捏、瑞典式、捶击、指压、拍打、推拿，震动和气压功能等多种按摩手法及组合，针对各个穴位进行按摩，有效舒缓疲劳、释压放松。

具备各种全身自动 / 手动按摩功能以符合您的各种要求。


除了精确的穴位按摩外,可同步进行各种按摩功能以形成特制按摩程序。

- 1 按摩齿轮采用连锁齿轮为背部穴位提供更深入的按摩。
- 2 根据人体工学设计，以提供更有效的按摩效果。
- 3 定时功能将按照你的需求对按摩时间进行调整。
- 4 液晶显示使手控器更易于操作。
- 5 具备过热过流保护，更加安全。
- 6 操作是由微型智能处理器控制，使性能始终如一，卓越有效。

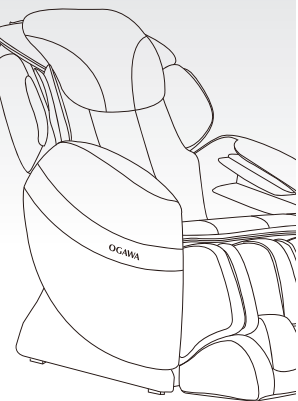

## 产品规格

产品名称	YOHO 优活椅 2
型号	OG-5308
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	120W
自动定时	15 分钟
最大工作时间	30 分钟
尺寸 (长 × 宽 × 高)	直立状态: 140(L)x75(W)x115(H)cm 倒背状态: 169(L)x75(W)x85(H)cm
重量	毛重: 88 公斤
	净重: 73 公斤
线长	手控器线长: 1.2 米
	电源线长: 1.8 米
使用环境	温度: 0°C -35°C
	湿度: 20-80RH
储存环境	温度: 0°C -35°C
	湿度水平: 20-80RH
安全装置	具有过热、过压和过流保护
按摩头	4 个
轨道形状	长 S 导轨

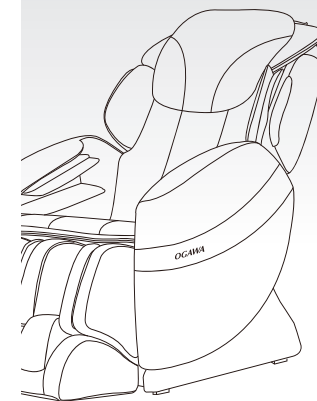


## 异常情况

此按摩椅为微电脑控制，对电压波较为敏感。如果电压波动超过限定电压 +10%或 -15%，按摩椅可能出现以下情况。


可能出现的异常情况	处理方法
插上电源，但按摩椅无法操作	1) 检查电源插头是否插好或是否通电 2) 检查按摩椅后下方的电源开关是否处于“1”的位置
使用过程中，控制器可以操作，但按摩椅无法操作	长时间操作后，按摩椅引擎的温度若过高，按摩椅将自动处于温度保护状态。请关闭电源并暂停使用 30~50 分钟以上让引擎内部散热。
使用过程中，控制器无法操作，按摩椅也无法操作	1) 在自动定时功能启动后，若定时时间已到，请重新按键即可操作。 2) 关掉电源，重新通电启动按摩椅

若以上处理方法无效，参阅《产品保修卡》，联系 OGAWA 服务中心。

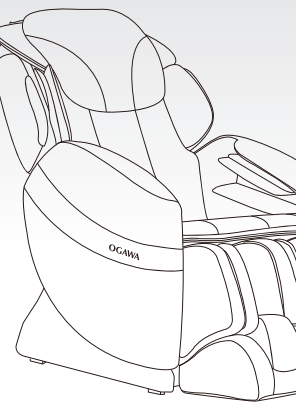

## 产品保养

- 避免用水或其他化学剂来清洗按摩椅。
- 避免重压、硬物敲击、强拉、刮花按摩椅表面。
- 操作时请轻触按键，避免以指甲按压。
- 使用后请立即拔出电源插头。
- 建议使用时间不超过 30 分钟，不宜过长过度使用将导致适得其反的效果。

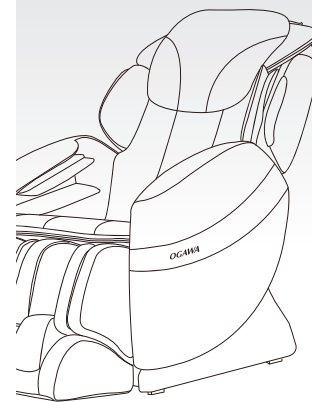

## 联系我们

厦门蒙发利营销有限公司

地址：厦门市思明区前埔路 168 号

邮编：361008

服务热线：400-885-9880

华东区域洽谈电话：021-62120981

地址：上海市普陀区曹杨路 505 号 901 室（尚诚国际大厦）

华北区域洽谈电话：010-58670435

地址：北京市朝阳区东三环南路 58 号富顿中心 A 座 2309-2311 室

华中区域洽谈电话：027-85605586

地址：武汉江汉区北湖西路城市之光 B 栋 2 单元 1101 室

华南区域洽谈电话：0755-83864515

地址：深圳市福田区中心区卓越大厦 411 室

东北区域洽谈电话：024-85611694


地址：沈阳市铁西区建设中路第一商城 B 栋 11 楼 02 室

西北区域洽谈电话：029-89284711

地址：西安市高新四路 1 号高科广场 A 座 2205 室

西南区域洽谈电话：028-61388807

地址：成都市武侯区人民南路四段 11 号大陆国际 2006

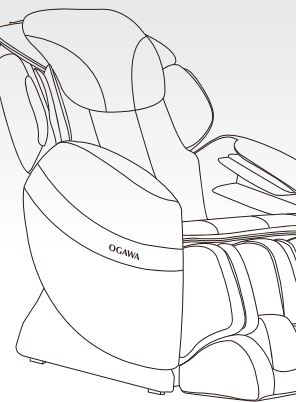

Ogawa is grateful  
to have received  
these awards:



销售商：厦门蒙发利营销有限公司  
地址：厦门市思明区前埔路 168 号



奥佳华官方微信二维码



奥佳华官方微博二维码